



FICHE PRODUIT

VELOX®

Nébulisation
en - de 3 mn* !



- **Une nébulisation en moins de 3 mn*** grâce à la technologie de tamis vibrant
- **Indication** : traitement des affections respiratoires chroniques (hors mucoviscidose)
- **Prescription minimum de 6 mois**
- **Silence et discrétion remarquables**
- **Totalement autonome** : alimentation sur piles ou sur secteur
- **Petit et léger** : facile à transporter, idéal pour les voyages
- **Utilisation intuitive** pour enfants et adultes
- **Entretien simple** : petit nombre de composants


CARACTÉRISTIQUES DE L' AÉROSOL PRODUIT* :

Temps d'inhalation : moins de **3 minutes**

Quantité d'aérosol produit : 0,80 ml

MMAD : 4,4 μm

Fraction respirable < 5 μm : 60%

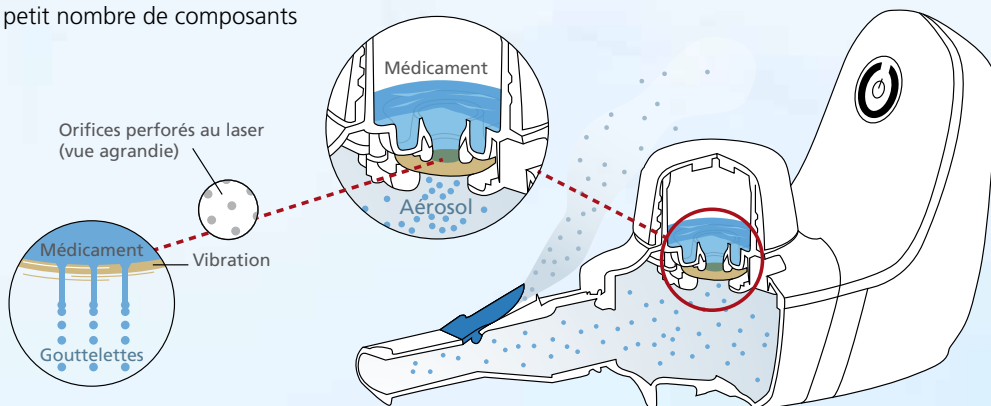

*Mesures in vitro PARI PHARMA selon modalités normes NF EN 13544 pour 2,5 ml NaCl 0,9%

Liste des composants :

- Générateur,
- Nébuliseur à tamis avec embout buccal,
- Bloc d'alimentation,
- Sacoche de transport,
- Dispositif de nettoyage du tamis (VELOXcare).



VELOX[®]care

VELOX[®] sacoche

VELOX[®] bloc d'alimentation

Alimentation : sur secteur : adaptateur multitenion (100-240V ~ / 50-60 Hz)

sur piles : 3 x 1,5 V AA LR6 / alcalines ou 3 x 1,2 V NiMH

Autonomie sur piles (piles neuves, rechargeables ou non, haute puissance) : **environ 4 heures.**

Poids : 110 g (sans les piles)
140 g (avec les piles)

Garantie : 2 ans pour le générateur


Ref. : 55G1006, Code ACL : 4260020436210

Mode de fonctionnement et granulométrie*:

VELOX, fabriqué par PARI GmbH, leader allemand dans l'aérosolthérapie¹, est un système de nébulisation à tamis vibrant.


- Le médicament liquide est projeté à travers un **tamis en acier inoxydable**, perforé de plusieurs milliers de micro-orifices, qui vibre à haute fréquence (160 KH).
- VELOX produit donc un **aérosol de granulométrie*** bien plus homogène que les nébuliseurs pneumatiques : une plus grande partie des gouttelettes sont d'une taille optimisée pour la déposition pulmonaire. Avec une durée d'inhalation clairement réduite !

¹ Source : Insight Health

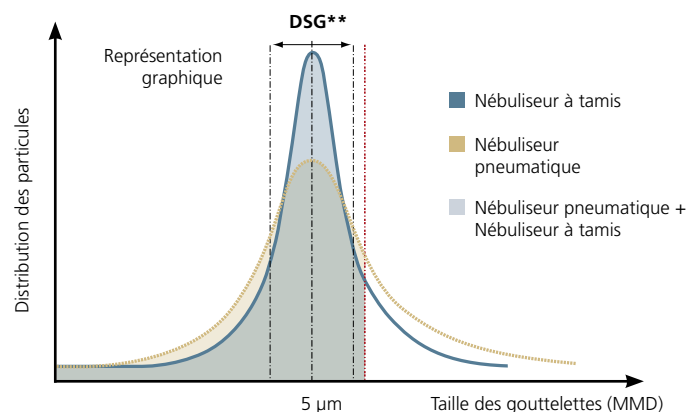

*Mesure de la répartition par taille des particules d'un aérosol
**Déviation Standard Géométrique

Performance de l'aérosol produit :

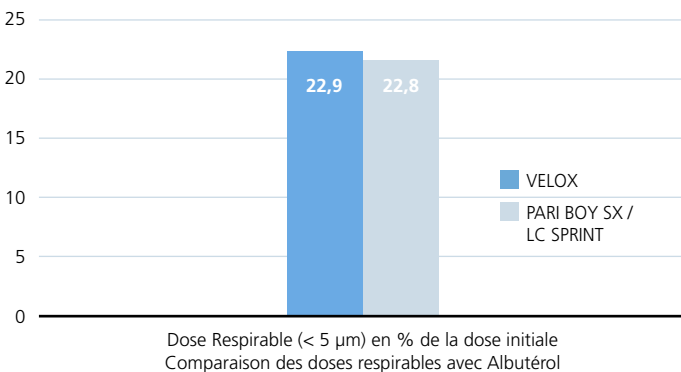

VELOX produit la **dose respirable** de médicament du couple de référence PARI BOY SX / LC SPRINT (voir graphique ci-contre) mais **beaucoup plus rapidement !**



Temps d'inhalation (pour 2.5 ml) :

VELOX : **moins de 3 mn**

PARI BOY SX / LC SPRINT : **environ 5 mn**

Mentions obligatoires :

VELOX[®] est un dispositif médical de **classe IIa** fabriqué par PARI GmbH - **CE n° 0123**. Ce dispositif est destiné aux indications suivantes selon la LPP : « **Aérosolthérapie par nébulisation dans le traitement des affections respiratoires (hors mucoviscidose) pour l'administration de médicaments ayant reçu l'AMM pour cette voie d'administration** ». **VELOX[®]** est inscrit à la liste LPPR aux codes suivants: **1162590, 1158973, 1163939**. **VELOX ne peut être utilisé que pour des prescriptions de 6 mois ou plus. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Créé en 02/2017.**



PARI PulmoMed SARL
Z.A. du Petit Nanterre 11, avenue de l'île Saint-Martin
92737 Nanterre Cedex
Tél : 01 56 83 85 00 - Fax : 01 56 83 85 09
e-mail: clients@pari-pulmomed.fr

www.pari.com